

TOAD tutorial

Auteur : GT Vallet

Version : v0.2 du 2015/06/10

1 Pré-requis

1.1 Compte sur les serveurs UNF

Pour utiliser TOAD au CRIUGM, il faut disposer d'un compte sur les serveurs informatiques de l'unité. Ce compte peut être personnel ou celui d'une équipe. L'informaticien de l'UNF, [Mathieu Desrosiers](#), est en charge de la création et de la gestion de ces comptes.

1.2 Ligne de commande

L'ensemble des outils de TOAD repose sur des commandes à entrer dans un terminal. L'introduction à l'usage de la ligne de commande et d'un terminal va au-delà de TOAD. Ainsi, nous vous renvoyons à de la documentation externe, par exemple :

— [Tutoriel OpenClassRooms](#)

1.3 Utilisation de SSH

L'utilisation de TOAD nécessite une connexion à distance entre votre ordinateur et les serveurs de l'UNF (même si vous utilisez les salles de traitement du centre). Il est vivement recommandé d'utiliser le protocole SSH. Ce dernier est installé par défaut sur les ordinateurs Apple McIntosh et sur les distributions GNU/Linux. Pour Windows, nous vous renvoyons à différentes documentations externes :

— [Tutoriel sur CommentCaMarche.net](#)

— [Tutoriel OpenClassRooms](#)

— [Vidéo Youtube en anglais](#)

1.4 Ajouter TOAD à votre session

1.4.1 Savoir si TOAD est disponible

Afin de pouvoir utiliser TOAD, vous devez ajouter ses sources à votre session. Tout d'abord, connectez-vous à votre session sur un des serveurs du l'UNF :

```
# Remplacer 'username' par votre identifiant UNF
ssh -Y username@stark.criugm.qc.ca
```

Pour savoir si TOAD est déjà disponible, taper la commande suivante :

```
which toad
```

Si la commande retourne un chemin d'accès du genre `/usr/local/toad/...`, vous n'avez rien de plus à faire. Si la commande ne retourne rien (écran vide), c'est que TOAD n'est pas disponible depuis votre session et que vous devez l'ajouter.

1.4.2 Ajouter TOAD

Si vous utilisez TOAD que très occasionnellement, vous pouvez sourcer TOAD à *chaque fois* que vous vous connectez au serveur en tapant la ligne de commande suivante :

```
source /usr/local/toad/etc/unf-toad-config.sh
```

Sinon, vous pouvez ajouter cette ligne de commande à votre profil de session pour que TOAD soit automatiquement ajouté à votre session à chaque connexion :

1. Ouvrir/Créer le fichier `‘.bash_profile’`

```
vi ~/.bash_profile
```

2. Passer en mode ‘édition’ pour ajouter du texte en appuyant sur **i**
3. Copier cette ligne à la fin du document (sans les guillemets) : `‘source /usr/local/toad/etc/unf-toad-config.sh’`
4. Pour sauvegarder et quitter l’éditeur, presser d’abord la touche **échappe** (ESC) puis taper **:wq** (ne pas oublier les deux points !)
5. Rafraîchir la mémoire de l’ordinateur pour tenir compte de cette modification :

```
source ~/.bash_profile
```

2 Récupération et préparation des données de neuroimagerie

2.1 Depuis la plateforme de l’UNF

La solution la plus simple et pratique pour la récupération des données de neuroimagerie acquises à l’UNF est d’utiliser la plateforme mise à disposition sur le site internet de l’unité. Cette plateforme s’occupe de la préparation des données et de leur compression pour un téléchargement et partage simplifié. Elle est accessible soit depuis **le site internet de l’unité de neuroimagerie** (Menu **Services** puis **Récupération des données IRM**), soit directement depuis **la plateforme de l’unité**

2.1.1 Préparation des données

1. Connectez-vous à <https://unf-montreal.ca>
2. Entrer votre identifiant et mot de passe de votre compte UNF
3. Sélectionner les données à récupérer et cliquer sur **Préparer les images** (garder le choix par défaut pour la compression des images **tar.gz**)
4. Donner un nom à l’archive à télécharger, pour notre exemple **unf-data** et cliquer sur **Soumettre**

Les données seront prêtes à télécharger après quelques instants. **Ne fermer pas** votre fenêtre de navigation, nous y reviendrons après.

2.1.2 Téléchargement des données

Pendant ce temps-là, ouvrez un terminal sur votre ordinateur et connectez-vous en ssh à un des serveurs de l’UNF (Magma ou Stark).

```
# Remplacer 'username' par votre identifiant de votre compte UNF
ssh -Y username@stark.criugm.qc.ca
```

Le serveur vous demandera alors le mot de passe de votre compte UNF.
Une fois connecté, naviguer dans votre répertoire de données :

```
# Remplacer 'labname' par le nom du laboratoire
# Remplacer 'username' par l'identifiant de votre compte UNF
cd /data/labname/username/
```

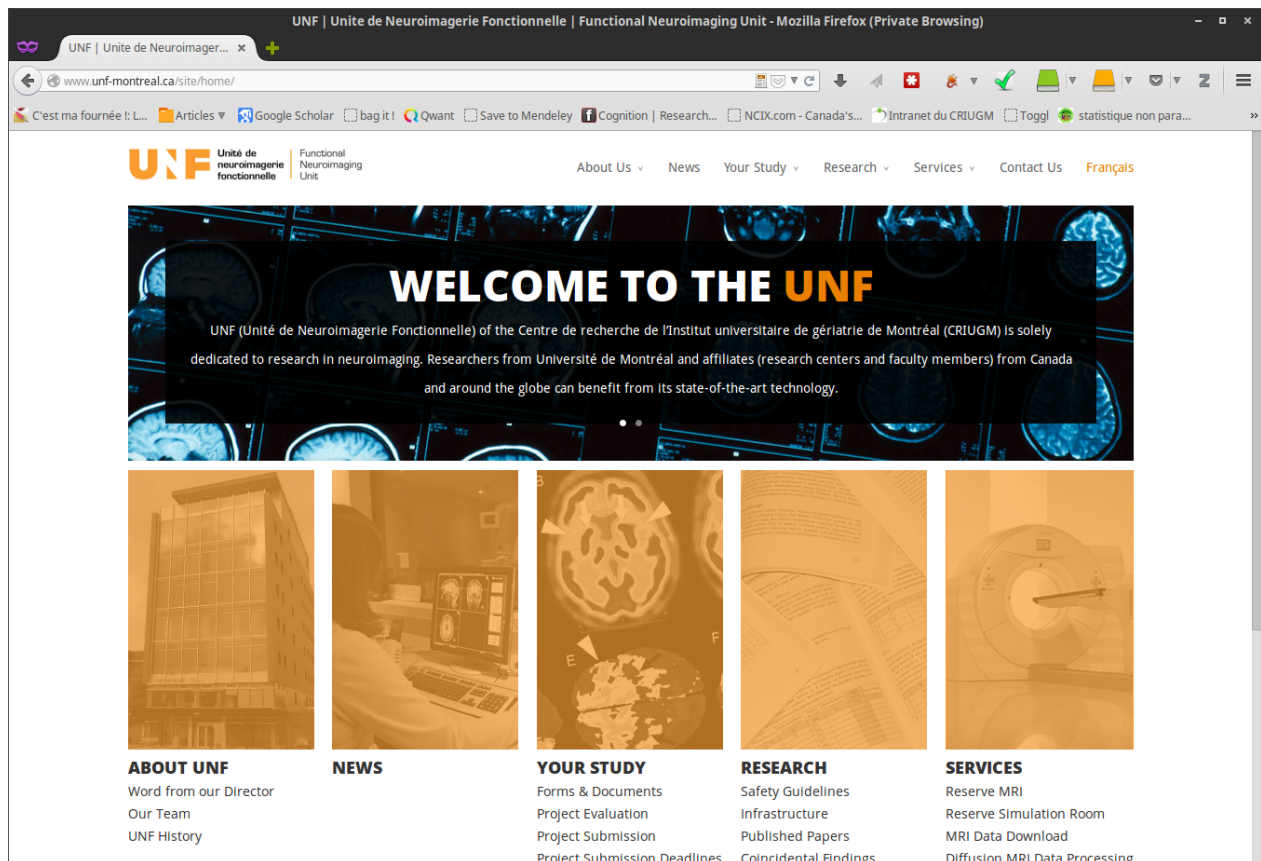


FIGURE 1 – Page d'accueil de l'UNF

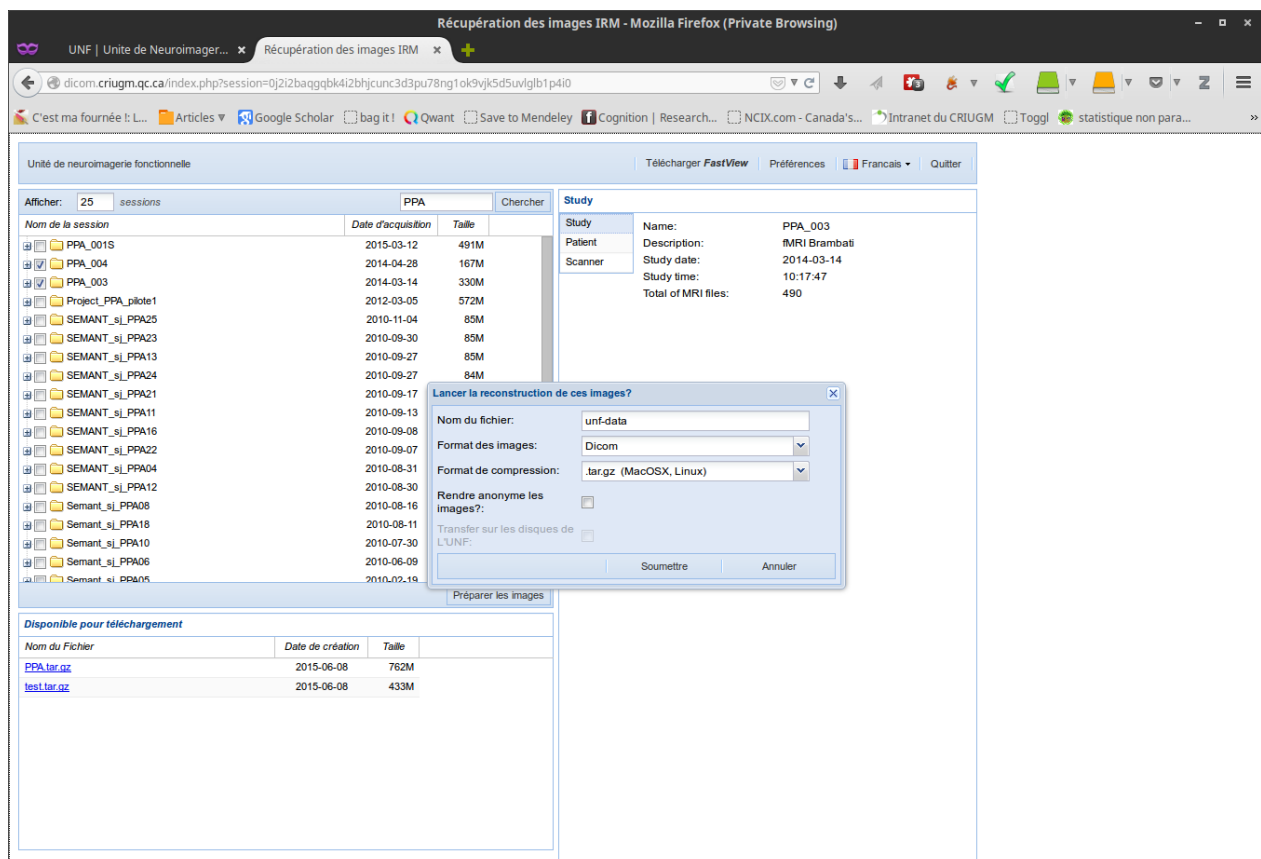


FIGURE 2 – Interface pour télécharger des sessions d'imagerie

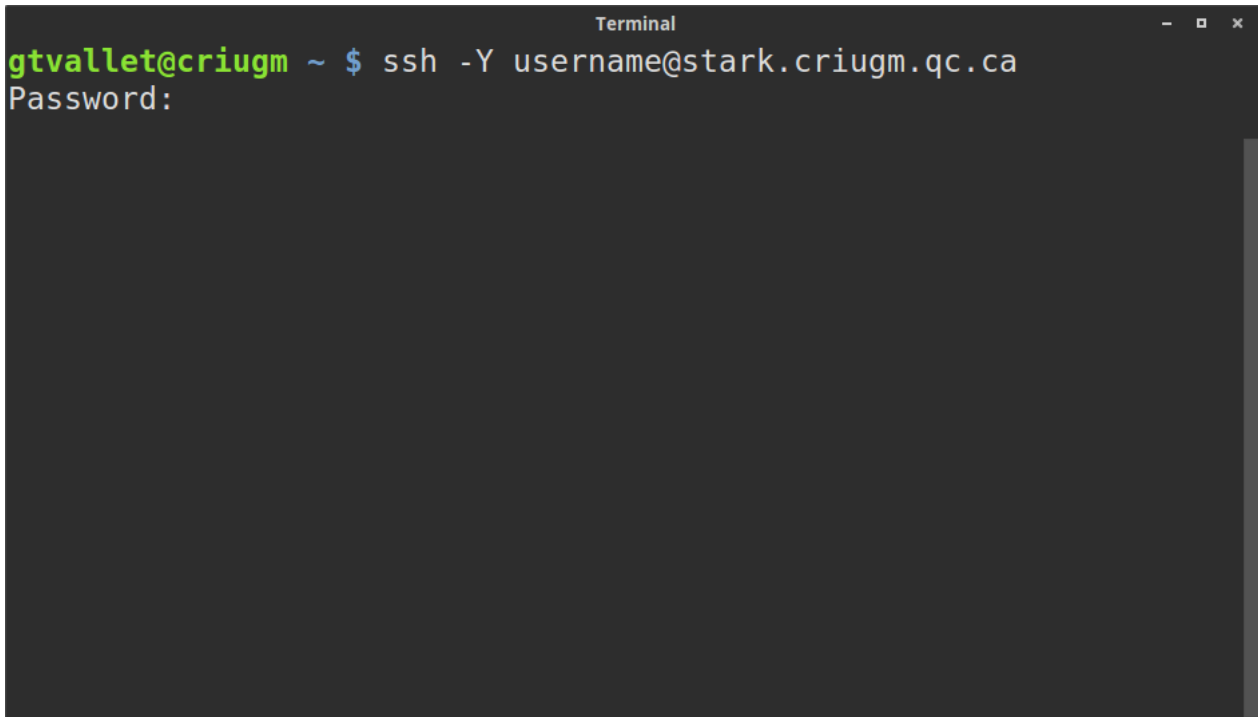


FIGURE 3 – Connexion SSH à Stark

Au besoin, créez un nouveau répertoire pour votre projet et déplacez-vous dans ce répertoire :

```
# Remplacer 'project_name' par le nom du projet
mkdir project_name

# Aller dans le nouveau répertoire
cd project_name
```

Télécharger les données préparées par l'UNF :

1. Retourner sur la page internet du site internet de l'UNF (si vous avez fermé votre navigateur, le lien est disponible pendant 7 jours dans la section **Services/Récupération des données IRM**)
2. Dans l'encadré en bas à gauche de la fenêtre, vous trouverez le lien (en bleu) des données préparées (le nom donné auparavant, comme 'unf-data.tar.gz'). **Copier le lien préparé par le système (clic droit, Copier le lien/Copy link location)**, dans notre exemple <http://downloads.criugm.qc.ca/username/unf-data.tar.gz>
3. Dans le terminal, entrer la commande suivante pour télécharger les données


```
# Taper wget puis un espace et faite un clic droit 'Coller' ou control-shift-v
wget http://downloads.criugm.qc.ca/username/unf-data.tar.gz
```

Vos données sont maintenant prêtes à être converties pour TOAD (voir section '3 Conversion des données').

2.1.3 Conversion des données

ATTENTION

TOAD propose son propre outil de conversion des données DICOM au format NIfTI, **unf2toad**. Il est **très vivement recommander** de l'utiliser, car cet outil permet *non seulement* de

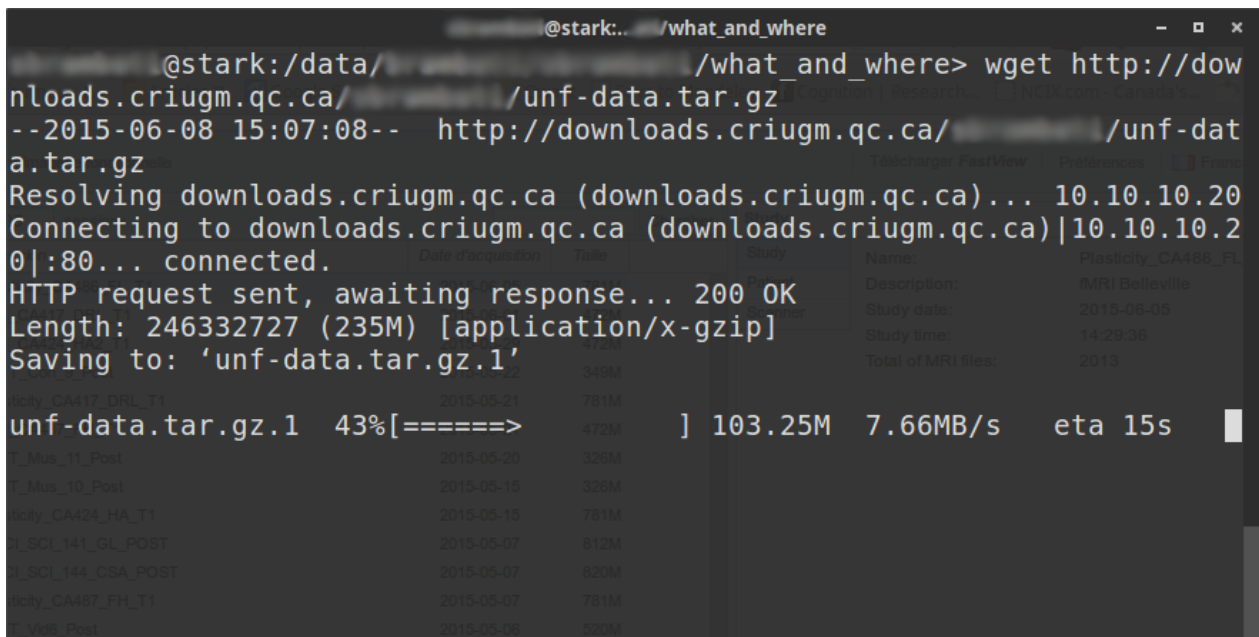

```
@stark:/data/ /what_and_where> wget http://downloads.criugm.qc.ca/ /unf-data.tar.gz
--2015-06-08 15:07:08-- http://downloads.criugm.qc.ca/ /unf-data.tar.gz
Resolving downloads.criugm.qc.ca (downloads.criugm.qc.ca)... 10.10.10.20
Connecting to downloads.criugm.qc.ca (downloads.criugm.qc.ca)|10.10.10.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246332727 (235M) [application/x-gzip]
Saving to: 'unf-data.tar.gz.1'

unf-data.tar.gz.1  43%[=====>] 103.25M  7.66MB/s  eta 15s
```

Date d'acquisition	Time	Study	Name	Description	Study date	Study time	Total of MRI files
icdy_CA417_DRL_T1	2015-05-21	781M					
T_Mus_11_Post	2015-05-20	320M					
T_Mus_10_Post	2015-05-15	320M					
icdy_CA424_HA_T1	2015-05-15	781M					
T_SCI_141_GL_POST	2015-05-07	812M					
T_SCI_144_OSA_POST	2015-05-07	820M					
icdy_CA457_FH_T1	2015-05-07	781M					
T_V05_Post	2015-05-06	820M					

FIGURE 4 – Téléchargement des données avec WGET

convertir vos données, mais *également* de préparer un fichier de configuration pour TOAD. Ce fichier tient compte d'informations existantes uniquement dans les données brutes et qui seront perdues par tout autre logiciel de conversion !

La décompression et la conversion des données sont automatiquement effectuées par `unf2toad`. Différentes options sont possibles (voir l'aide `unf2toad -h`), dont la possibilité de spécifier le nom du répertoire dans lequel ajouter les fichiers convertis. Par défaut, `unf2toad` crée un nouveau répertoire `toad_data` dans lequel il placera les sessions/sujets convertis.

Remplacer 'unf-data.tar.gz' par le nom de votre archive

`unf2toad unf-data.tar.gz`

Pour spécifier un répertoire cible, ici 'DWI'

`unf2toad -d DWI unf-data.tar.gz`

Le logiciel vous posera une série de questions pour préciser quel dossier correspond à quel type d'images (anatomique, diffusions, etc.), indiquer le code du participant, etc.

Une des forces d'`unf2toad` est de pouvoir gérer de multiples sessions/sujets à la fois. Ainsi, le logiciel vous indiquera tout d'abord une liste des sessions/sujets détectés au sein de l'archive. Une `*` qui suit le code du sujet indique que le sujet a déjà été converti.

Lorsque plusieurs sessions/sujets partagent l'exacte même structure de données, `unf2toad` vous proposera d'appliquer à la chaîne les choix faits pour le premier sujet de la série.

2.2 Depuis une autre source d'acquisition

2.2.1 Type de données

Les analyses de diffusion nécessitent la présence d'au moins trois types de données par participant :

1. **données anatomiques** (T1, type MPRAGE) : création des masques anatomiques, coregistration
2. **données de diffusion** (DWI) : faisceaux de matière blanche (extraction des fibres)

```

@stark: /what_and_where
-----
Please choose a session to convert
0.  None or exit
1.  PPA_003 *
2.  PPA_004
Enter your choice [0-2]: Default None [0] :

```

FIGURE 5 – unf2toad en action

3. **acquisition des données de diffusion** (fichiers b) : spécifications relatives à l’acquisition des données de diffusion (intensités et directions) regroupées en un seul fichier (*.b*) ou en deux fichiers (*.bval* et **.bvec*)

D’autres données peuvent servir à TOAD pour le traitement des données :

- **courants de Foucault** (Eddy Correction) : fichiers des gradients antérieur-postérieur et/ou postérieur-antérieur
- **inhomogénéité du champ** (fieldmap) : ... [FIXME]

2.2.2 Format des fichiers

Pour des raisons de simplicité, TOAD accepte seulement quelques formats :

- neuroimagerie : **format NIfTI** (*.nii*)
- encodage : format regroupé **MRTRIX** (*.b*) ou séparé en valeurs et vecteurs (*.val* et *.vec*).

2.2.3 Organisation des données

Si vous disposez de données déjà converties au format NIfTI ainsi que des fichiers d’encodage, vous pouvez utiliser TOAD sans passer par la conversion au préalable. Nous vous recommandons de regrouper les données de la façon suivante :

- un dossier parent contenant tous les dossiers participants
- chaque dossier participant contenant tous les fichiers de neuroimagerie (**.nii*, **.b*)

Attention : *dans ce cas de figure, il est de votre responsabilité de vous assurer les données ont été correctement converties et que le fichier d’encodage respecte bien les normes habituelles (strides...). Si ces données proviennent d’un scanner Siemens (comme à l’UNF), et si vous disposez encore des données brutes, nous recommandons fortement de reconvertir les données avec le logiciel **unf2toad** voir section Conversion des données

2.2.4 Nomenclature des fichiers

TOAD doit identifier quels fichiers correspondent à quels types d’images. Pour ce faire, TOAD se base sur des préfixes des noms des fichiers qui doivent être communs pour chaque type de

fichiers. Ainsi, toutes les images anatomiques devront commencer par un même préfixe, par défaut TOAD cherchera des fichiers commençant par **anat**. Pour les images de diffusions, TOAD cherchera des fichiers commençant par **dwi** et pour l'encodage à **b0**. Lorsque les données antérieur/postérieur ou postérieur/antérieur sont disponibles, TOAD cherchera comme préfixe **b0_ap** et **b0_pa**.

Vous êtes libres d'utiliser n'importe quelle nomenclature du moment qu'elle soit indiquée dans le fichier de configuration **config.cfg**. Cette nomenclature devra être constante à travers les sujets à moins de spécifier un nouveau fichier de configuration au sein du dossier du participant en question.

2.3 Jeu de données de démonstration

TOAD vous propose de télécharger un jeu de données limité pour découvrir comment fonctionne le pipeline. Suivre les étapes suivantes pour le récupérer :

```
# Connexion aux serveurs de l'UNF
# Remplacer 'username' par votre identifiant UNF
ssh -Y username@stark.criugm.qc.ca

# Naviguer dans votre répertoire de données
# Remplacer 'labname' par le nom du laboratoire
# Remplacer 'username' par l'identifiant de votre compte UNF
cd /data/labname/username/

# Créer un dossier pour le projet
# Remplacer 'project_name' par le nom du projet
mkdir project_name

# Aller dans le nouveau répertoire
cd project_name

# Télécharger le jeu de données
wget http://unf-montreal.ca/downloads/toad_dicom.tar.gz
```

3 TOAD

3.1 Lancement de TOAD

Une fois la conversion des données d'imagerie effectuée, il suffit de lancer la commande **toad** depuis le dossier contenant les fichiers convertis :

```
# Déplacement dans le dossier des données converties
cd toad_data

# Lancement de TOAD
toad *
```

Le traitement complet d'un participant prend environ 2 jours. Plusieurs participants peuvent être traités en parallèle sur les serveurs selon la charge qu'ils subissent à ce moment-là.

3.2 Vérifications

3.2.1 *Traitement en cours*

Sur les serveurs de l'UNF, il est possible de savoir combien de sujets sont actuellement traités avec la commande `qstat`.

Si vos données sont toujours en cours de traitement, vous devriez voir apparaître votre nom d'utilisateur associé au nom du sujet traité et au logiciel en cours d'utilisation (comme FreeSurfer).

3.2.2 *Post traitement*

Une fois le travail terminé, vous trouverez un ensemble de nouveaux dossiers dans chacun des répertoires sujets. *Pour rappel*, ce dossier est par défaut inclus dans le dossier initial de votre projet sous le nom de `toad_data` ou de celui que vous lui avez donné lors de la conversion des données par `unf2toad`.

Ces nouveaux dossiers contiennent l'ensemble des données, masques, et images produits par TOAD lors du traitement des données de diffusions. L'ensemble des dossiers pour chaque sujet devrait ressembler à peu près au tableau ci-dessous :

Nom du dossier	Type de données
00-backup	Données originales (Nifti)
00-qa	Quality Assessment - pages HTML de synthèse
01-preparation	Réorientation des images si nécessaire
02-parcellation	Parseg et Brodmann, gauche/droite (Freesurfer)
03-eddy	Correction mouvement, inhomogénéité du champs, etc.
04-denoising	Débruitage des images
05-preprocessing	
06-registration	Registration T1/DWI
07-masking	Création des masques
08-snr	Calcul du rapport signal sur bruit
09-tensorfsl	Calcul des tenseurs DTI (FSL)
10-tensormrtrix	Calcul des tenseurs DTI (MRTRIX)
11-tensordipy	Calcul des tenseurs DTI (Dipy)
12-hardimrtrix	Calcul du modèle HARDI (MRTRIX)
13-hardidipy	Calcul du modèle HARDI (Dipy)
16-results	
99-logs	Fichiers logs et erreurs

Note : Il est possible que cet arbre change avec les versions de TOAD. De même, le choix de certains paramètres au lancement de TOAD ou l'absence de certains type de fichiers (comme les B0 AP/PA) font que certaines tâches ne seront pas lancées.

Ainsi, une première vérification du bon déroulement de TOAD consiste à vérifier que ces

dossiers ont bien été créés pour chaque participant. L'absence d'une série de dossier indique que le pipeline a probablement rencontré un problème et a dû s'arrêter pour le participant en question.

Dans ce cas, il est utile d'aller regarder le dernier log produit par TOAD. Ce fichier `*.log` se trouvera dans le dernier répertoire créé par TOAD ou alors dans le dossier `99-logs`. Ce dossier renferme également un fichier regroupant les erreurs rencontrées par TOAD, et possède un nom du type `numéro_sujet.e1111` où 1111 correspond au numéro de travail de la tâche dans le système.

Les résultats peuvent être rapidement évalués grâce aux QA...

Section à développer

En cas de problème, vous trouverez plus d'informations dans le dossier log, consultable dans chacun des dossiers traités par TOAD :

```
# Remplacer 'toad_data' par le nom du dossier utilisé lors de la conversion  
cd toad_data/subject_name/99-logs
```

```
# Lister les logs disponibles  
ls
```

```
# Consultation d'un fichier log, ici results.log  
vi results.log
```